



1. QU'EST-CE QUE LE STYLO DE TRAITEMENT DES VERRUES VERRUFLASH® ET À QUOI SERT-IL ?

Le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH® est un dispositif médical utilisé pour le traitement des verrues affectant les pieds, les mains, le corps, les bras et les jambes. Il convient aux adultes et aux enfants à partir de 4 ans.

Les verrues sont de petites excroissances cutanées causées par le papillomavirus humain (HPV). Les verrues apparaissent souvent sur les doigts ou sur le dos des mains. Vous pouvez reconnaître une verrue commune par son apparence rugueuse en forme de « chou-fleur ». Les verrues plantaires apparaissent uniquement sur la plante des pieds. Elles peuvent être douloureuses et ressemblent souvent à une petite excroissance de peau en forme d'anneau blanc avec des points noirs au centre. Le virus est très contagieux, ce qui signifie que les verrues peuvent se développer et se propager, surtout si elles ne sont pas traitées. Le virus peut également se transférer à d'autres parties du corps ou d'une personne à une autre.

2. COMMENT FONCTIONNE LE STYLO DE TRAITEMENT DES VERRUES VERRUFLASH®?

Le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH® est spécialement conçu pour une administration topique directement sur les verrues. Après application, la solution se disperse localement dans la verrue. Le stylo contient de l'acide formique, qui en desséchant la racine de la verrue aide l'organisme à la rejeter en douceur.

3. AVANT D'UTILISER LE STYLO DE TRAITEMENT DES VERRUES VERRUFLASH®

- Ne pas utiliser le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH® si vous êtes allergique (hypersensible) à l'un des ingrédients listés dans la section 7 ou aux piqûres d'abeilles/fourmis.
 - Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4 ans.
 - Une attention particulière doit être portée si vous êtes diabétique ou souffrez de mauvaise circulation sanguine (maladie vasculaire périphérique) aux mains ou aux pieds.
 - Ne pas utiliser le stylo de traitement près du visage, du cou, des aisselles, des seins, des fesses ou des parties génitales.
 - Ne pas utiliser sur des "verrues" avec des poils, des verrues faciales, des taches de naissance, des grains de beauté, des taches pigmentaires ou toutes autres tâches. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir une verrue adaptée au traitement avec le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH®, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de commencer le traitement.
 - Ne pas appliquer le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH® sur des verrues douloureuses ou saignantes, sur une peau irritée, inflammée, avec des cloques ou endommagée. Attendez que la peau soit saine.
 - Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres thérapies de suppression des verrues.
 - Essayez d'éviter une exposition inutile au soleil car cela peut provoquer une décoloration temporaire (soit un assombrissement ou un éclaircissement) de la peau traitée.
 - Ne pas couvrir la zone traitée avec un pansement. L'utilisation d'un pansement après le traitement peut causer des dommages à la peau.
 - Prenez des précautions particulières lors de l'utilisation de ce produit. Il contient un agent corrosif avec une forte odeur. Ne pas inhaler. Appliquez le traitement dans un espace bien ventilé. Ne pas secouer le stylo. Ouvrez toujours le stylo horizontalement au-dessus d'un évier.
 - Appliquez le traitement soigneusement et en petite quantité uniquement sur la verrue.
 - Prenez soin de ne pas appliquer le traitement sur la peau saine environnante, surtout sur la peau délicate des jeunes enfants, car une application incorrecte ou excessive du traitement peut entraîner des cloques, des inflammations, des lésions tissulaires, des cicatrices, des brûlures ou d'autres blessures.
- Lorsqu'il est utilisé chez les enfants, pour des raisons de sécurité, il doit toujours être appliqué par un adulte. Pour les endroits difficiles à atteindre, la solution doit toujours être appliquée par un adulte.

Il n'y a pas de risques spécifiques connus pour les femmes enceintes ou allaitantes. Il est recommandé de consulter votre médecin, pharmacien avant utilisation.

SI LE PRODUIT ENTRE ACCIDENTELLEMENT EN CONTACT AVEC LES YEUX OU LES MUQUEUSES, RINCEZ IMMÉDIATEMENT AVEC BEAUCOUP D'EAU PENDANT 15 MINUTES ET CONSULTEZ UN MÉDECIN.

4. COMMENT UTILISER LE STYLO DE TRAITEMENT DES VERRUES VERRUFLASH®?

Le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH® délivre une petite quantité de solution incolore. Ne pas secouer le stylo car cela pourrait l'endommager, provoquant des fuites. Avant de l'utiliser pour la première fois ou en cas de doute sur la sécheresse de la pointe du stylo, pressez la pointe contre un morceau de papier absorbant pour vérifier le flux de liquide.

Il est important d'appliquer le traitement initialement pour des temps de contact très courts. Le nombre précis de secondes nécessaires dépend de la taille, de l'âge et de l'emplacement de la verrue que vous traitez. Il est préférable d'appliquer trop peu de traitement en cas de doute.

Pour utiliser le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH®, suivez les étapes décrites ci-dessous tous les deux jours (les jours 1, 3 et 5) suivis de 2 jours de repos. Utilisez uniquement sur les verrues, sur les sites pour lesquels il est recommandé. Continuez à utiliser le stylo de traitement de cette manière jusqu'à ce que la verrue disparaisse ou pendant un maximum de 6 semaines. Ne dépassez pas la fréquence ou le nombre d'applications recommandées ni le temps de contact maximum.

- A. Il est recommandé de tremper la zone affectée dans de l'eau tiède pendant au moins 5 minutes pour adoucir la peau avant le traitement.
- B. Si la verrue est recouverte de peau dure, frottez doucement la peau dure de la surface de la verrue ou de la verrue plantaire, en prenant soin de ne pas casser la peau. Prenez soin de ne pas limer la verrue ou la verrue plantaire elle-même.
- C. Ouvrez le stylo avec précaution : Ouvrez toujours le stylo horizontalement au-dessus d'un évier.
- D. Retirez le capuchon du stylo.

E. Frottez doucement la verrue avec la pointe du stylo de traitement pendant le temps de contact approprié (selon les indications ci-dessous). La solution pénètre immédiatement dans la couche externe de la verrue. Assurez-vous de traiter toute la verrue mais prenez soin de ne pas toucher ou renverser le produit sur la peau saine environnante.

G. Appliquez le traitement tous les deux jours (les jours 1, 3 et 5) suivis de 2 jours de repos. Répétez jusqu'à ce que la verrue disparaisse ou pendant un maximum de 6 semaines.

Lors de la première utilisation, soyez prudent car seulement une petite quantité de traitement est nécessaire. Commencez par traiter une seule verrue pendant 1 seconde pour voir comment la peau réagit. Si la peau n'est pas affectée et que le traitement est bien toléré, augmentez progressivement le temps de contact du traitement en utilisant les informations ci-dessous comme guide :

- Pour les jeunes enfants (âgés de 4 à 11 ans), ceux ayant une peau délicate, pour les petites verrues ou verrues plantaires, commencez prudemment et progressivement et augmentez progressivement le temps de contact du traitement jusqu'à un maximum de 10 secondes.
 - Pour les verrues plus grandes ou les verrues plantaires tenaces sur la plante des pieds, commencez prudemment et progressivement et augmentez progressivement le temps de contact du traitement jusqu'à un maximum de 20 secondes.
- En cas d'inconfort ou de douleur, arrêtez l'application. Si cela brûle, pique ou si la solution est appliquée sur une peau saine, rincez à l'eau froide.

5. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Il est important d'utiliser le produit comme indiqué. Ne pas l'utiliser de manière excessive car cela peut causer des dommages à la peau.

- Une légère sensation de picotement ou de brûlure peut, dans certains cas, être ressentie pendant 10 à 15 minutes après le traitement.
- Si utilisé sur une peau saine, des effets secondaires transitoires peuvent survenir, tels que des picotements, des irritations, des rougeurs, des douleurs ou des saignements, arrêtez le traitement jusqu'à ce que la peau soit complètement rétablie et gardez la zone propre pour éviter une éventuelle infection.
- Il peut y avoir un changement transitoire de la pigmentation de la peau traitée exposée au soleil.
- Ce produit a une forte odeur. Il peut provoquer une irritation du système respiratoire, de la gorge et/ou des yeux. Ne pas sentir directement le contenu du stylo car cela peut provoquer des effets secondaires tels qu'un nez qui coule, des yeux larmoyants ou des difficultés respiratoires.

Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin, pharmacien. Les incidents graves doivent être signalés au fabricant ou à l'autorité compétente.

6. STOCKAGE

Conservez entre 2 et 25°C et à l'abri de la lumière directe du soleil. Gardez dans l'emballage d'origine et hors de la vue et de la portée des enfants. Rebouchez toujours fermement le stylo après utilisation. Éliminez le produit en toute sécurité une fois qu'il n'est plus nécessaire ou vide.

7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE STYLO DE TRAITEMENT DES VERRUES VERRUFLASH®

Ingrédients : Acide formique (85 %), diméthyl isosorbide, aqua (water).

Le contenu de l'emballage :

- Un stylo de traitement contenant 3 ml de liquide (suffisant pour un minimum de 220 applications).
- Cette notice d'information - que vous devez lire attentivement avant utilisation.

Usage unique pour un seul patient - utilisations multiples

Le Style de Traitement des Verrues VERRUJEI ASH® est classé et enregistré comme un Dispositif Médical de Classe IIA marqué CE conformément au Règlement sur les Dispositifs Médicaux




Cette notice a été révisée pour la dernière fois en avril 2025.

Pour plus d'informations sur le Stylo de Traitement des Verrues VERRUFLASH®, visitez : www.laboratoire-addax.com



101034

€ 0425

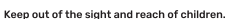

1. WHAT VERRUFLASH® WART TREATMENT PEN IS AND WHAT IT IS USED FOR ?

VERRUFLASH® Wart Treatment Pen is a medical device used for the treatment of warts and verrucas on feet, hands, body, arms and legs. It is suitable for use by adults and children from 4 years of age.

- * Warts are small excessive growths in the skin caused by the human papilloma virus (HPV). Warts often occur on the fingers, or on the back of the hands. You can recognize the common wart by the rough cauliflower-like appearance of the surface. Verrucas occur only on the sole of the foot. They can be painful, and often look like a small white ring of skin with black dots in the center. The virus is very infectious. This means that warts can grow and spread particularly if left untreated. The virus can also be transferred to other parts of the body or from one person to another.

2. HOW VERRUFLASH® WART TREATMENT PEN WORKS ?

VERRUFLASH® Wart Treatment Pen is specifically designed for topical administration directly onto warts and verrucas. Following application, the liquid is locally dispersed into the wart or verruca. The pen contains formic acid, which dries out the infected skin, thereby treating the wart or verruca.

3. BEFORE YOU USE VERRUFLASH® WART TREATMENT PEN

Do not use VERRUFLASH® Wart Treatment Pen if you are known to be allergic (hypersensitive) to any of the ingredients listed in Section 7 or bee/ant stings.

- Do not use on children under the age of 4.
- Extra care should be taken if you have diabetes or suffer from poor blood circulation (peripheral vascular disease) to your hands or feet.
- Do not use the treatment pen anywhere near your face, neck, armpits, breasts, bottom, or genital (sex) area.
- Do not use on "warts" with hair growing from them, facial warts, birthmarks, moles, pigmented skin or any other spots. If you are unsure whether you have a wart or verruca that is suitable for treatment with VERRUFLASH® Wart Treatment Pen. Ask your doctor, pharmacist, before starting treatment.
- Do not apply VERRUFLASH® Wart Treatment Pen to sore or bleeding warts, irritated, inflamed, blistered or damaged skin. Wait until the skin has recovered.
- Do not use it in combination with other wart removal therapies.
- Try to avoid unnecessary exposure to sunlight as this may cause temporary discoloration (either darkening or lightening) of the treated skin.

Take special care when using this product. It contains a corrosive agent with a strong smell. Do not inhale. Apply the treatment in a well-ventilated space. Do not shake the pen. Always open the pen horizontally over a sink.

Apply the treatment carefully to the wart or verruca only. You only need to apply a small amount of the treatment:

- Take care not to apply the treatment to surrounding healthy skin, especially on young children's delicate skin, because when applied incorrectly or excessively the treatment can result in blisters, inflammation, tissue damage, scars, burns or other wounds.
- When used on children, for safety reasons, it must always be applied by an adult. For difficult to reach places the solution should always be applied by another adult.
- There are no specific known risks for pregnant or breast-feeding women, however, it is recommended to consult your doctor, pharmacist or nurse prior to use.

IF THE PRODUCT ACCIDENTALLY COMES INTO CONTACT WITH THE EYES OR MUCOUS MEMBRANE, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY OF WATER FOR 15 MINUTES AND SEEK MEDICAL ADVICE.

4. HOW TO USE VERRUFLASH® WART TREATMENT PEN ?

4. **HOW TO USE VERRUFLASH® WART TREATMENT PEN ?**
VERRUFLASH® Wart Treatment Pen delivers a small amount of colorless solution. Do not shake the pen because this may damage it, causing it to leak. Before using it for the first time or if in doubt whether the tip of the pen is dry, press the tip against a piece of absorbent paper to check the liquid flow.

It is important to apply the treatment initially for very short contact times. The precise number of seconds required depends on the size, age and location of the wart or verruca you are treating. It is better to apply too little treatment if in doubt.

To use the VERRUFLASH® Wart Treatment Pen follow the steps outlined below every other day (on days 1, 3 and 5) followed by 2 days' rest. Use only on warts and verrucas, on sites for which it is recommended. Carry on using the treatment pen in this way until the wart or verruca disappears or for a maximum of 6 weeks. Do not exceed the frequency or number of recommended applications or the maximum contact time.

- It is recommended to soak the affected area in lukewarm water for at least 5 minutes to soften the skin prior to treatment.
- If the wart or verruca is covered by hard skin, gently rub the hard skin off the surface of the wart or verruca, taking care not to break the skin. Take care not to file the wart or verruca itself.
- Open the pen carefully: Always open the pen horizontally over a sink.

C. Open the pen carefully, always open the pen horizontally over a sink.

D. Remove the cap of the pen.

E. Gently stroke the wart with the tip of the treatment pen for the appropriate contact time (as per the guidance below). The solution penetrates immediately into the outer layer of the wart or verruca.

Make sure to treat the whole wart or verruca but take care not to touch or spill the product onto surrounding healthy skin.

6. Apply the treatment every other day (on days 1, 3 and 5) followed by 2 days rest. Repeat until the wart or verruca disappears or for a maximum of 6 weeks.

On first use, be cautious as only a small amount of treatment is required. Start by treating a single wart or verruca for 1 second to see how the skin reacts. If the skin is unaffected and the treatment is well tolerated, then gradually build up the treatment contact time using the information below as a guide:

- For younger children (ages 4 to 11 years), those with delicate skin, for small warts or verrucas, start cautious and conservatively and gradually build up the treatment contact time to a maximum of 10 seconds.
- For larger warts or stubborn verrucas on the sole of the feet, start cautious and conservatively and gradually build up the treatment contact time to a maximum of 20 seconds.
- Should any discomfort or pain occur, stop application. If it burns, stings or if solution is applied to healthy skin, rinse with cold water.

5. POSSIBILE SIDE EFFECTS

It is important to use the product as instructed. Do not use it excessively as this can cause skin damage.

- It is important to use the product as instructed. Do not use it excessively as this can cause skin damage.
- A mild tingling or burning sensation can, in some cases, be felt for 10 to 15 minutes after treatment.
- If used on healthy skin, transient side effects can occur, such as stinging, irritation, redness, pain or bleeding, stop treatment until the skin has fully recovered and keep the area clean to avoid possible infection.
- There may be a transient change to the pigmentation in treated skin which is exposed to the sun.
- This product has a strong smell. It may cause irritation to the respiratory system, throat and/or the eyes. Do not smell the contents of the pen directly as this may cause side effects such as a runny nose, runny eyes or difficulty in breathing.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. Serious incidents should be reported to the manufacturer or relevant authority.

6. STORAGE

Store between 2 and 25°C and out of direct sunlight. Keep in the original packaging and out of sight and reach of children. Always recap the pen firmly after use. Dispose of the product safely once no longer required.

7. FURTHER INFORMATION ABOUT VERRUFLASH® WART TREATMENT PEN


ingredients: Formic acid (85 %), dimethyl isosorbide, Aqua (water).

The pack contents:

- a treatment pen containing 3 ml of liquid (sufficient for minimum of 220 applications)
- This information leaflet - which you must read carefully prior to use.

Single patient - multiple use

VERRUFLASH® Wart Treatment Pen is classified and registered as a CE marked Medical Device Class IIa regarding the Medical Device Regulation.

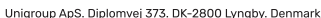

This leaflet was last revised in april 2025

Find out more about VERRUFLASH® Wart Treatment Pen at: www.laboratoire-addax.com





1. WAT IS DE VERRUFLASH® STIFT OM WRATTEN TE BEHANDELEN EN WAARVOOR WORDT DEZE GEBRUIKT?

VERRUFLASH® Stift om wratten te behandelen is een medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van wratten op de voeten, handen, het lichaam, armen en benen. Het is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar

Wratten zijn kleine huidgezwellets die worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Wratten verschijnen vaak en ook op de vingers of de rug van de handen. Je kunt een gewone wrat herkennen aan zijn ruwe "kool-fleut" uiterlijk. Plantaire wratten verschijnen alleen op de voetzolen. Ze kunnen pijnlijk zijn en zien er vaak uit als een klein wit ringvormig huidgezwel met zwarte puntjes in het midden. Het virus is zeer besmettelijk, wat betekent dat wratten zich kunnen ontwikkelen en verspreiden, vooral als ze onbehandeld blijven. Het virus kan ook worden overgedragen naar andere delen van het lichaam van de ene persoon naar de andere.

2. HOE WERKT DE VERRUFLASH® STIFT OM WRATTEN TE BEHANDELEN ?

De VERRUFLASH® Stift om wratten te behandelen is speciaal ontworpen voor topische toediening direct op wratten. Na het aanbrengen verspreidt de oplossing zich plaatselijk in de wrat. De pen bevat mierenzuur dat, door de wortel van de wrat uit te drogen, het lichaam helpt om de wrat voorzichtig af te stoten.

3. VÓÓR GEBRUIK VAN VERRUFLASH® STIFT OM WRATTEN TE BEHANDELEN

- Gebruik VERRUFLASH® Stif om wratten te behandelen niet als u allergisch (overgevoelig) bent voor een van de ingrediënten die in rubriek 7 worden genoemd of voor bijensteken/mieren.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar.
- Wees extra voorzichtig als u diabetes heeft of een slechte bloedsomloop (perifere vaatziekte) in de handen of voeten.
- Gebruik de behandelen niet in de buurt van het gezicht, de nek, oksels, borsten, billen of geslachtsdelen.
- Niet gebruiken op "wratten" met haar, gezichtswratten, moedervlekken, pigmentvlekken of andere vlekken. Als je niet zeker weet of je een wrat hebt die geschikt is voor behandeling met VERRUFLASH® Stif om wratten te behandelen, vraag dan advies aan je arts of apotheker voordat je met de behandeling begint.
- Breng VERRUFLASH® Stif om wratten te behandelen niet aan op pijnlijke of bloedende wratten, geïrriteerde, geïrriteerde, gebarsten of beschadigde huid. Wacht tot de huid hersteld is.
- Niet gebruiken in combinatie met andere wratverwijderingstherapieën.
- Probeer onnodige blootstelling aan de zon te vermijden, omdat dit tijdelijke verkleuring (donkerder of lichter worden) van de behandelde huid kan veroorzaken.
- Bedek het behandelde gebied niet met een verband. Het gebruik van een verband na de behandeling kan de huid beschadigen.
- Neem speciale voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product. Het bevat een bijtend middel met een sterke geur. Niet inademen. Breng de behandeling aan in een goed geventileerde ruimte. Stel de deuren niet open en het licht op zijn laagste stand.
- Breng de behandeling voorzichtig en slechts een kleine hoeveelheid aan op de wrat.
- Zorg ervoor dat u de behandeling niet op of om de omringende gezonde huid aanbrengt, vooral niet op de tere huid van jonge kinderen, omdat onjuiste of overmatige toepassing van de behandeling kan leiden tot blaasvorming, ontsteking, weefselbeschadiging, littekenvorming, brandwonden of ander letsel.
- Bij gebruiken bij kinderen moet het om veiligheidsredenen altijd door een volwassene worden aangebracht. Op moeilijk bereikbare plaatsen moet de oplossing altijd door een andere volwassene worden aangebracht.

Er zijn geen specifieke risico's bekend voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Het wordt aanbevolen om voor gebruik uw arts of apotheker te raadplegen.

4. HOE GEBRUIK JE DE VERRUFLASH® WRATTENBEHANDELINGSPEN?

De VERRUFLASH® Stift om wratten te behandelen levert een kleine hoeveelheid kleurloze oplossing. Schud de pen niet, want dit kan de pen beschadigen en lekkage veroorzaken. Voor het eerste gebruik, of als je twijfelt over de droogheid van de penpunt, druk je de punt tegen een stuk absorberend papier om de flux van de vloeistof te controleren.

Het is belangrijk om de behandeling in eerste instantie voor zeer korte contacttijden toe te passen. Het precieze aantal seconden dat nodig is, hangt af van de grootte, leeftijd en locatie van de wrat die je behandelt. Bij twijfel is het beter om te weinig behandeling aan te brengen.

Om VERRUFLASH® Stift om wratten te behandelen te gebruiken, volg de hieronder beschreven stappen om de dag (dag 1, 3 en 5) gevolgd door 2 dagen rust. Alleen gebruiken op wratten, op plaatsen waarvoor het wordt aanbevolen. Blijf de treatment pen op deze manier gebruiken tot de wrat verdwijnt of gedurende maximaal 6 weken. Overschrijd de aanbevolen frequentie of het aantal toepassingen of de maximale contacttijd niet.

A. Het wordt aanbevolen om het aangetaste gebied voor de behandeling minstens 5 minuten in lauw water te weken om de huid te verzachten.

B. Als de wrat bedekt is met harde huid, wrijf dan voorzichtig de harde huid van het oppervlak van de wrat of plantaire wrat, waarbij je erop let dat je de huid niet kapot maakt. Zorg ervoor dat je de wrat of plantaire wrat zelf niet vijlt.

C. Open de pen voorzichtig; open de pen altijd horizontaal boven een gootsteen.

D. Verwijder de dop van de pen.

F. Herhaal de behandeling om de dag aan (dag 1, 3 en 5) gevolgd door 2 dagen rust. Herhaal dit tot de wrat verdwijnt of gedurende maximaal 6 weken.

Wanneer de verlening van de vergoeding (of, indien van toepassing, de vergoeding voor schade van de patiënt) wordt voortgezet, wordt de vergoeding maximaal 6 weken. H. heeft de handen grondig na het aanraken van wratten.

- Voor jonge kinderen (van 4 tot 11 jaar), kinderen met een gevoelige huid, kleine wratten of plantaire wratten: begin voorzichtig en verhoog de contacttijd van de behandeling geleidelijk tot maximaal 10 seconden.

- Voor grotere wratten of hardnekkige plantaire wratten op de voetzolen begin je voorzichtig en verhoog je geleidelijk de contacttijd van de behandeling tot maximaal 20 seconden

Als je ongemak of pijn voelt, stop dan met het aanbrengen. Als het brandt of prikt, of als de oplossing op de gezonde huid is aangebracht, spoel dan af met koud water.

5. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Het is belangrijk om het product te gebruiken zoals voorgeschreven. Gebruik het niet overmatig, want dit kan huidbeschadiging veroorzaken.

- In sommige gevallen kan er gedurende 10 tot 15 minuten na de behandeling een licht prikkend of branderig gevoel optreden.
- Bij gebruik op een gezonde huid kunnen voorbijgaande bijwerkingen optreden, zoals tintelingen, irritatie, roodheid, pijn of bloedingen. Stop de behandeling totdat de huid volledig hersteld is en houd het gebied schoon om mogelijke infectie te voorkomen.
- Er kan een voorbijgaande verandering optreden in de pigmentatie van behandelde huid die wordt blootgesteld aan zonlicht.
- Dit product heeft een sterke geur. Het kan irritatie aan de luchtwegen, keel en/of ogen veroorzaken. Ruik niet rechtstreeks aan de inhoud van de pen, want dit kan bijwerkingen veroorzaken zoals een loopneus, tranende ogen of ademhalingsmoeilijkheden.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u bijwerkingen ervaart. Ernstige incidenten moeten worden gemeld aan de fabrikant of de bevoegde autoriteit.

6. OPSLAG

Bewaren tussen 2 en 25°C en buiten direct zonlicht. Bewaar in de originele verpakking en buiten het zicht en bereik van kinderen. Sluit de pen altijd goed af na gebruik. Gooi het product veilig weg wanneer het niet langer nodig of leeg is.

7. AANVULLENDE INFORMATIE OVER VERRUFLASH® STIFT OM WRATTEN TE BEHANDELEN


Ingrediënten : Mierenzuur (85%), dimethylisosorbide, aqua (water).

Inhoud van de verpakking:

- Een behandelingspen met 3 ml vloeistof (voldoende voor minimaal 220 toepassingen)
- Deze bijsluiter - voor gebruik zorgvuldig lezen.

Gebruik door één patiënt - meervoudig gebruik

De VERRUFLASH® Stift om wratten te behandelen is geclassificeerd en geregistreerd als een medisch hulpmiddel met CE-markering van Klasse IIA volgens de regelgeving voor medische hulpmiddelen.

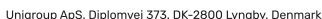

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in april 2025.

Voor meer informatie over VERRUFLASH® Stift om wratten te behandelen, bezoek: www.laboratoire-addax.com

